








## Mode d'emploi

Art-nr. 549.50

### Confectopharm® TF-200

## Appareil à remplir les tubes

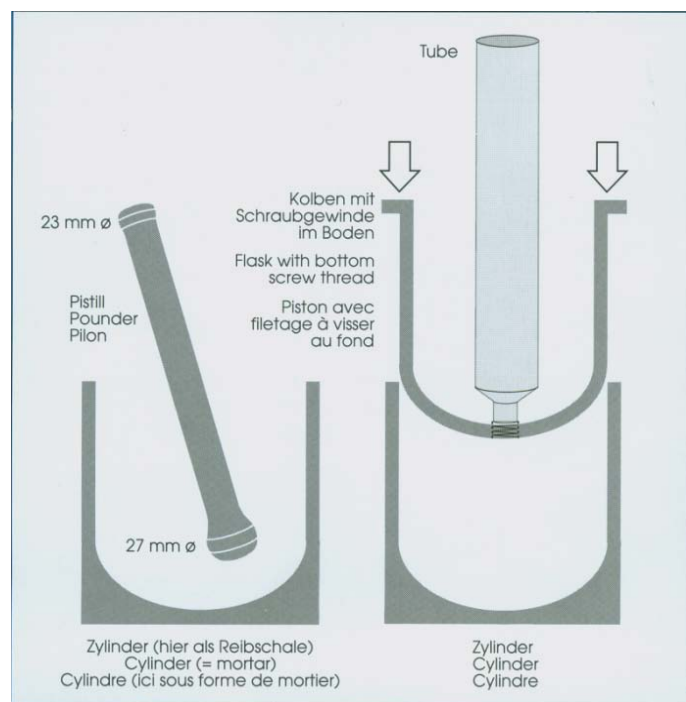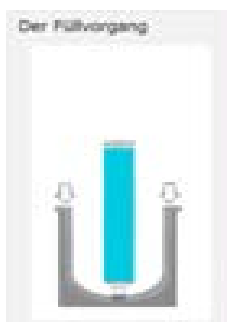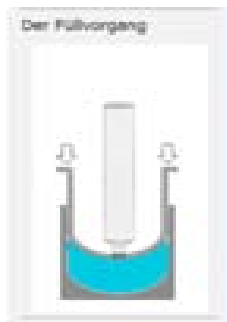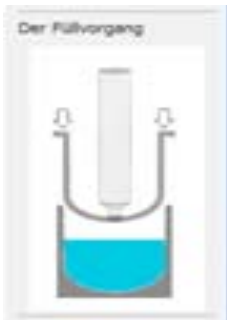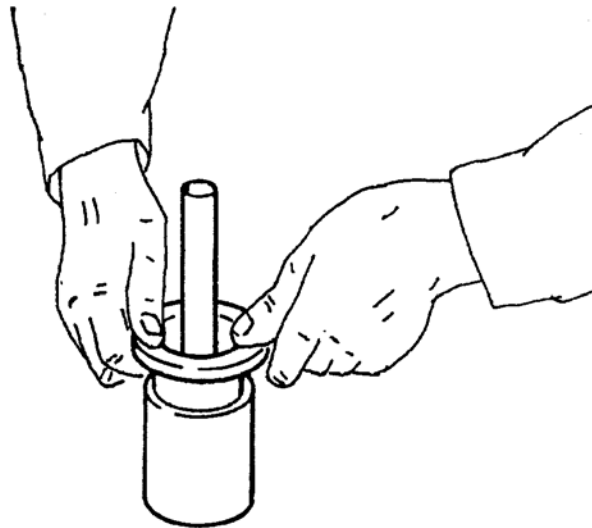

# Confectopharm® TF-200 appareil à remplir les tubes

Mode d'emploi à lire attentivement avant utilisation.

## Utilisation

La préparation des crèmes, émulsions ou gels ainsi que le remplissage des tubes se font dans cet appareil.

## Consigne de sécurité

- Le Confectopharm® TF-200 n'est pas approprié pour le four à micro-onde. Une utilisation dans le four à micro-onde conduit à une destruction du matériel.
- Les temps indiqués pour la stérilisation doivent être strictement observés, autrement il y a menace de destruction du matériel.
- En remplissant le tube, ne pas regarder dans le tube vissé dans le piston, risque de projection dans les yeux d'une partie de la préparation (surtout si la consistance est fluide).

## Première utilisation

Nettoyer l'appareil avant utilisation (voir « Nettoyage »)

## Stérilisation

Emballer le piston et le cylindre (mortier) ensemble ou séparément dans une feuille d'aluminium. Stériliser dans l'armoire séchoir pendant 30 minutes à 180°

Observer strictement le temps de stérilisation, sinon il y a menace de destruction du matériel.


## Contenance / Remplissage

Pour la préparation de 50 ml, utilisez le Confectopharm® TF-200 art-nr. 549.50

Pour une plus grande quantité allant jusqu'à 300 ml il est conseillé d'utiliser le Confectopharm® TF-500 art-nr. 549.300

## Manipulation

Les différents ingrédients peuvent être pesés dans le mortier (1) du Confectopharm® et mélangés et/ou triturés à l'aide du pilon 549.195 (2)

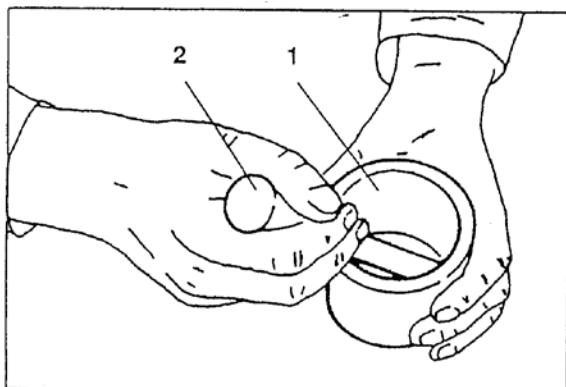

### **Vissage du tube**


Le Confectopharm® TF-200 est équipé d'un pas de vis M-9. Un raccord (adaptateur) pour les tubes 546.5 et 546.10 à pas de vis M-7 est également inclus.

- Vissez fortement l'adaptateur sur le tube.
- Vissez ensuite le tube (4) avec l'adaptateur légèrement dans le piston (5) sans forcer. L'adaptateur ne doit pas dépasser le fond du piston !

Une fois terminer, dévissez de la même manière, en sens inverse le tube avec son adaptateur.

### **Utilisation de tube à pas de vis M-9**

- Vissez directement le tube (4) dans le sens des aiguilles d'une montre dans le piston (5).

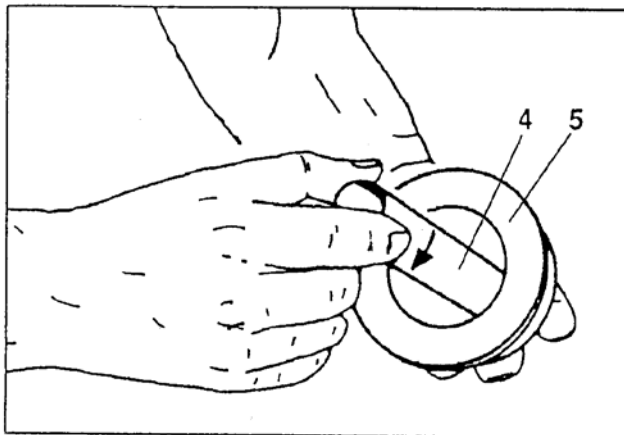


### **Remplissage des tubes manuellement**

Sur le rebord du mortier (1) et sur le dessous du piston (6) se trouvent des cames. Veillez en introduisant le piston (5) à ce que les cames (6) de celui-ci soient décalées par rapport à celles du mortier(1).

Placez lentement le piston (5) dans le mortier (1) et appuyez jusqu'au fond, la préparation est ainsi poussée dans le tube.

Le tube est rempli !

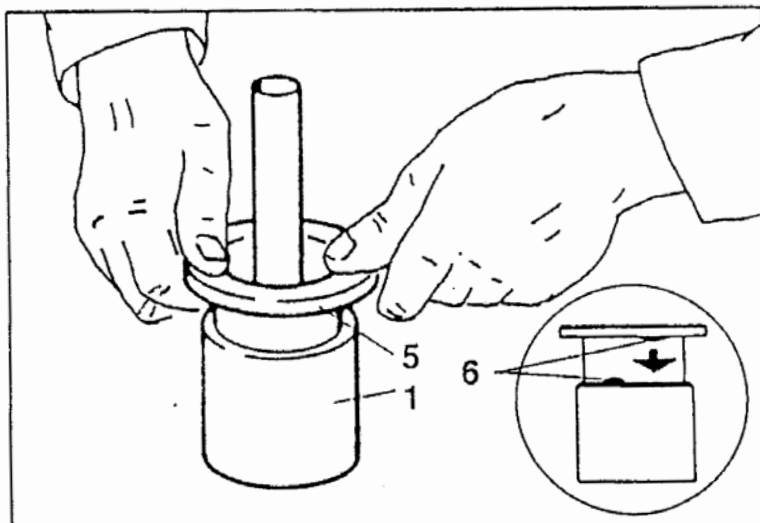

### Enlèvement du tube


Lors de préparations fluides il est préférable, avant de dévisser le tube, de fermer l'arrière du tube en le comprimant avec la pince.

Tenez bien le piston et le mortier, dévissez prudemment le tube contre le sens des aiguilles d'une montre.

Si vous essayez de retirer le piston avant d'avoir enlevé le tube, le contenu sera aspirer à nouveau dans le mortier et tout le processus doit être renouveler.


### Fermeture du tube

Après avoir dévissé le tube, fermez le tube (4) à l'avant avec la fermeture à vis (7).

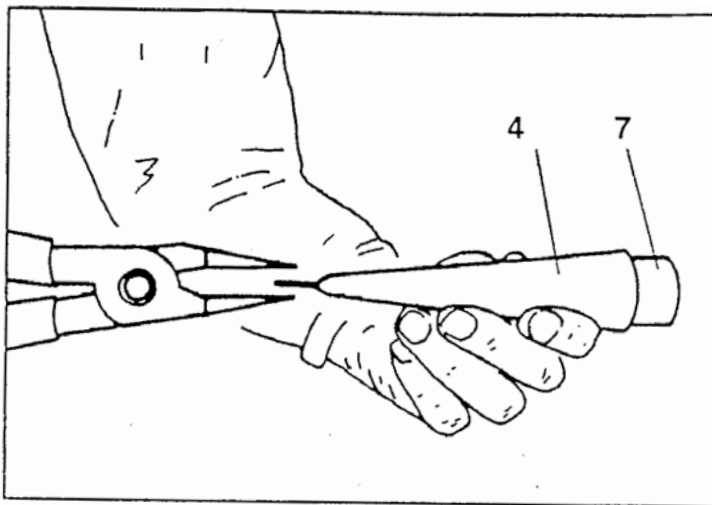

Comprimez l'arrière du tube avec la pince à fermer les tubes (549.1) repliez un morceau de 5 mm et renouvelez l'opération plusieurs fois.


Le tube (4) est maintenant fermé.

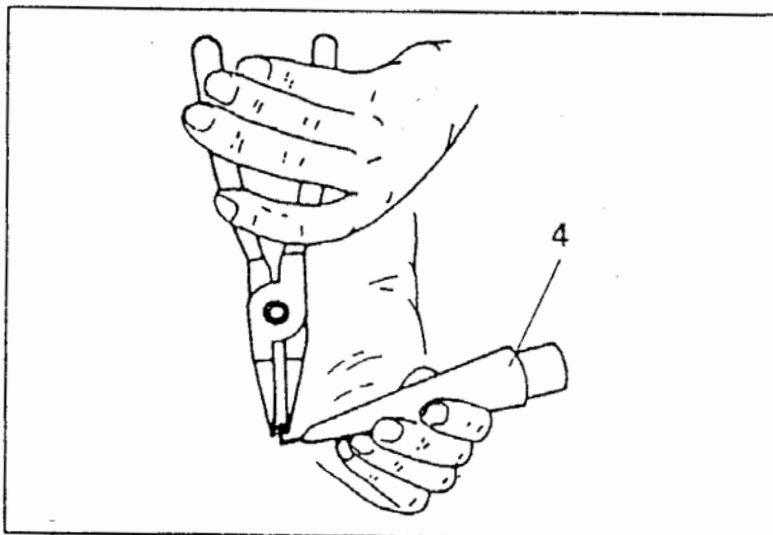

### Séparation du piston du mortier

Tournez le piston (5) dans le sens opposé du mortier (1) afin que les cames glissent l'une sur l'autre (6).

De cette manière le piston (5) se décolle du mortier (1) et s'enlève facilement.

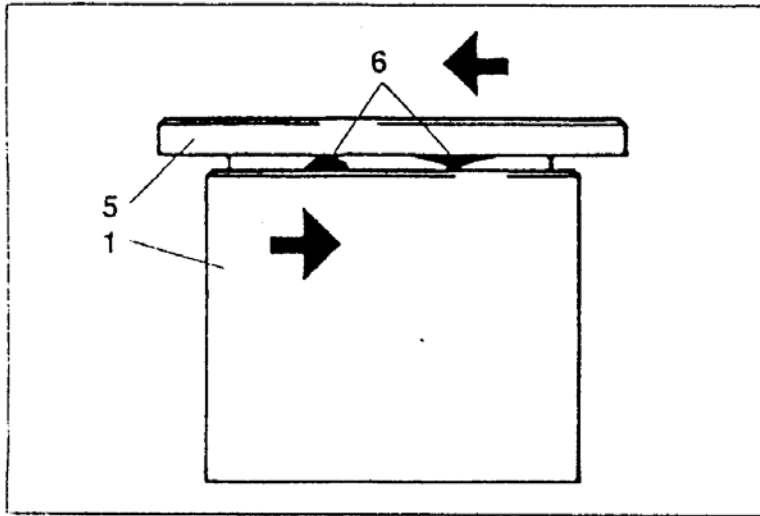


### Les résidus

De faibles résidus de la préparation risquent de rester dans le mortier.

Au besoin, ceux-ci peuvent être enlevés à l'aide d'une carte et rajoutés dans le tube.

### Tubes à onguent

Après avoir rempli nos tubes en aluminium art-nr. 546.5 à 546.100 (4) vous devez rajouter l'embout conique spécial nez art-nr. 546.44 (9)

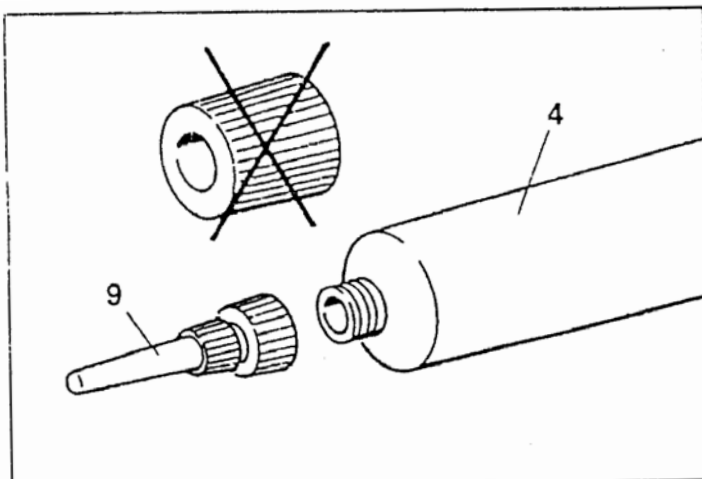

Si vous utilisez les tubes avec fermetures à vis il vous faut l'adaptateur allant du pas de vis M-9 à M-7 (accessoires livrables).

- Vissez solidement l'adaptateur sur le tube.
  - Vissez ensuite le tube avec l'adaptateur légèrement dans le piston sans forcer.
- L'adaptateur ne doit pas dépasser le fond du piston !

Une fois terminé, dévissez de la même manière, en sens inverse le tube avec son adaptateur.

## **Nettoyage**

Le piston et le mortier sont résistants envers les produits désinfectants ou de nettoyage tel que l'acétone, Ethanol, l'éther, le chloroforme, le méthanol ainsi que les ingrédients contenu dans les produits d'onguent comme les Phénols, Résorcine, l'acide sébacique-Diéthylester (Mycanden®) Thesit®.

### **Le nettoyage peut se faire :**

- Dans de l'eau chaude avec un détergent habituel.
- Avec un solvant organique.
- Dans le lave-vaisselle.

### **Conseil pour le nettoyage du filetage.**

Dans une cuvette d'eau, mettre le piston dans le mortier et le retirez, ceci plusieurs fois sous l'eau, le tenir absolument horizontalement (risque d'éclaboussures).

Alternative : utilisez une petite brosse pour tube à essai.

### **Accessoires livrables**

Art-nr. 549.7 Adaptateur Confectopharm pour pas de vis M-9 à M-7

Art-nr. 549.9 Adaptateur Confectopharm pour pas de vis M-11 à M-9

Art-nr. 549.195 Pilon spécial Confectopharm

